

OMNIA ASPIRADORES Y COLECTORES DE HUESO



ASPIRADORES Y COLECTORES DE HUESO

Los kits de aspiración son dispositivos que se usan ampliamente en las clínicas dentales durante los diferentes procedimientos médicos para drenar tanto la sangre de las heridas como las secreciones de fluido producidas en la cavidad bucal durante la realización de operaciones quirúrgicas, operaciones de cirugía piezoeléctrica, procedimientos de control y tratamientos dentales conservadores.

Los kits de aspiración OMNIA son perfectos para ser usados en las más variadas ramas de la cirugía, así como para cualquier tipo de operación médica.

Están disponibles con empuñaduras y agarraderas en los extremos de diferentes formas según las necesidades especiales del cirujano dental, y se suministran con o sin tubo de conexión. Los kits de aspiración deben conectarse a la unidad de tratamiento dental del cirujano dental o al sistema de aspiración centralizado mediante los casquillos en forma de cono pertinentes, los cuales se han suministrado con la unidad de tratamiento dental o disponibles en las clínicas dentales.

El uso de un colector de huesos ofrece una solución especialmente eficaz y racional para la extracción de tejido óseo y desempeña un papel esencial en la rutina de los implantes. Una característica importante del colector de hueso desechable es su fácil colocación cerca de la punta de aspiración, gracias a una rosca corta con grandes espirales que se enrosca rápidamente. El uso de colectores de hueso desechables es una solución extremadamente eficaz para hacer frente a las necesidades de regeneración de tejidos.

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

El aspirador quirúrgico con punta de aspiración **Yankauer** es adecuado para todas aquellas intervenciones quirúrgicas donde se requiere una aspiración precisa, para no perjudicar la visibilidad del campo operatorio. Las boquillas especiales que se colocan alrededor del perímetro apical de la punta de aspiración evitan cualquier aspiración accidental de pequeños bordes de tejido durante la gingivoplastia. El aspirador está fabricado en PVC transparente de grado médico, para no absorber la luz de las lámparas operativas sin sombras que oscurecen la zona quirúrgica. Se suministra con conectores flexibles resistentes a la torsión, además de estar habilitado para el colector de extracción de hueso autólogo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F2046.00	Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Yankauer (cada paquete contiene 1 adaptador - Adap. 05) en PVC	10/Caja
32.F2044.00	Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Yankauer, con control de la aspiración (cada paquete contiene 1 adaptador - Adap. 05) en PVC	10/Caja
32.F2048.00	Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Yankauer grande (6 mm de diámetro), sin control de la aspiración (cada paquete contiene 1 adaptador - Adap. 05) en PVC	10/Caja
32.F2063.00	Aspirador quirúrgico, de 2,50 m, con punta de aspiración Yankauer y compatible también con el colector de extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 05) en PVC	5/Caja
32.F2065.00	Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Omniaurg (cada paquete contiene 1 adaptador - Adap. 05) en PVC	10/Caja

El aspirador quirúrgico con punta de aspiración **Cattani** permite una aspiración rápida gracias a la forma especial de dicha punta, cuyo diámetro es de 4,5 mm. El tubo de PVC de grado médico ligero permite movilidad y comodidad durante largas sesiones quirúrgicas. Los conectores flexibles resistentes a la torsión evitan que el tubo forme una coca mecánica involuntariamente. Se suministra con conectores para el colector de hueso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F2020.00	Aspirador quirúrgico, de 2,50 m, con punta de aspiración Cattani y compatible también con el colector de extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 05) en PVC	10/Caja

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Gracias a la empuñadura ergonómica de la punta de aspiración, el aspirador **ASP51/F** hace que las operaciones de aspiración sean fáciles y precisas, incluso en presencia de material de injerto óseo. El tubo de PVC de grado médico ligero permite movilidad y comodidad durante largas sesiones quirúrgicas. Los conectores flexibles resistentes a la torsión evitan que el tubo forme una coca mecánica involuntariamente durante los procedimientos quirúrgicos. El tubo dispone de una serie de conectores Luer-Lock para la conexión del colector de hueso **OsteoTrap**; gracias a este dispositivo, no es necesario usar un segundo tubo de aspiración. También está disponible un modelo con un dispositivo de control de vacío en la empuñadura de la punta de aspiración que permite ajustar la velocidad de aspiración durante el uso.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F5051.00	Aspirador, de 2,50 m, con punta de aspiración con empuñadura ergonómica y compatible también con el colector de extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 05) en PVC	5/Caja
32.F5052.00	Aspirador, de 2,50 m, con punta de aspiración con empuñadura ergonómica, sin control de la aspiración y compatible también con el colector de extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 05) en PVC	5/Caja

COLECTORES DE HUESO

Los colectores de hueso están destinados a la recogida de fragmentos óseos extraídos y que por lo general, se pierden durante la preparación de la zona del implante, mediante un sistema de filtrado por aspiración, que permite recuperar la cantidad de tejido máximo equivalente al volumen del implante insertado. El colector de extracción de hueso autólogo desechable dispone de un práctico conector para la conexión de dicho colector de extracción de hueso autólogo al aspirador quirúrgico. **OsteoTrap** es un producto médico de alta calidad, que fue diseñado expresamente para usarse en la extracción de hueso autólogo para implantes dentales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F7072.00	El colector de extracción de hueso autólogo OsteoTrap desechable con conector para la conexión a aspiradores quirúrgicos de PVC + ABS	5/Caja
32.F7076.00	El colector de extracción de hueso autólogo desechable sin conector para la conexión a aspiradores quirúrgicos de PVC + ABS y con tubo de 6 mm de diámetro	5/Caja

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN EQUIPADO CON COLECTOR DE HUESO

El aspirador Omniasp es un sistema de aspiración completo, en el que el colector para la extracción de hueso autólogo se monta directamente entre la punta de aspiración Omniasp y el tubo de aspiración. El colector de hueso pretende recoger el hueso autólogo que se extrajo y que por lo general, se pierde durante la preparación del sitio del implante, al filtrar el material aspirado. Esta operación permite la extracción de una cantidad de material equivalente al volumen del implante. Recomendamos el uso de un segundo tubo de aspiración durante las etapas de preparación de la zona quirúrgica para no contaminar la red filtrante.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F7077.00	Kit de aspiración, 2,20 m, con punta de aspiración Omniasp y colector de hueso para la extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 05)	5/Caja

TUBOS DE ASPIRACIÓN QUIRÚRGICOS SIN PUNTA DE ASPIRACIÓN

Los tubos de aspiración quirúrgica sin punta de aspiración son extremadamente flexibles, poseen una cavidad grande para alcanzar el máximo rendimiento de aspiración y han sido diseñados expresamente para evitar que dicha cavidad se reduzca durante las etapas de aspiración. Disponen de conectores flexibles resistentes a la torsión para facilitar el flujo de fluido, y pueden estar habilitados o no para la conexión del colector de hueso.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F3030.00	Aspirador quirúrgico, de 2,50 m, sin punta de aspiración compatible con el colector de extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 05)	10/Caja

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F7078.00	Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con conectores cónicos (cada paquete contiene 1 adaptador - Adap. 05)	10/Caja

PUNTAS DE ASPIRACIÓN

Las puntas de aspiración desechables Omnia para aspiradores quirúrgicos están fabricadas en plástico de grado médico.


Las puntas de aspiración garantizan una aspiración específica y segura durante las operaciones quirúrgicas. Están disponibles con empuñaduras y agarraderas en los extremos de diferentes formas según las necesidades especiales del cirujano dental, y se suministran sin tubo de conexión.

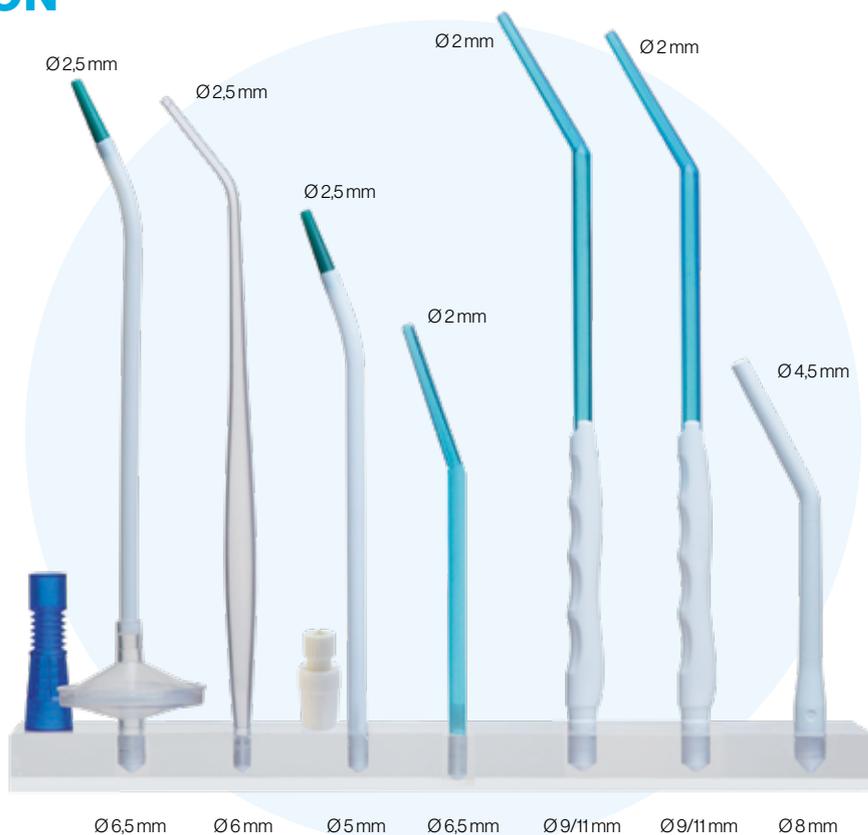

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
32.F7070.00	Punta de aspiración estéril modelo Omniaurg con colector de hueso desechable (cada paquete contiene 1 adaptador Adap.04) (longitud de la punta: 20 cm) en PVC	5/Caja
32.F6363.00	Punta de aspiración estéril Yankauer (longitud de la punta: 24,5 cm) en PVC	10/Caja
32.F6361.00	Punta de aspiración estéril Yankauer con control de aspiración (longitud de la punta: 24,5 cm) en PVC	10/Caja
32.F6366.00	Punta de aspiración estéril Yankauer grande (6 mm de diámetro) sin control de aspiración (longitud de la punta: 24,5 cm) en PVC	10/Caja
32.F6565.00	Punta de aspiración estéril modelo Omniaurg (cada paquete contiene 1 adaptador Adap.08) (longitud de la punta: 20 cm) en PVC	20/Caja
32.F4046.00	Punta de aspiración estéril Omnia (longitud de la punta: 17 cm) en ABS	25/Caja
22.F6061.00	Punta de aspiración con empuñadura ergonómica y regulador de aspiración (longitud de la punta: 15 cm) en ABS	10/Caja
22.F6063.00	Punta de aspiración con empuñadura ergonómica y sin regulador de aspiración (longitud de la punta: 15 cm) en ABS	10/Caja
32.F4040.00	Punta de aspiración estéril Cattani n°9 (longitud de la punta: 14,5 cm) en PP	25/Caja

ADAPTADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CANT.
30.Z1060.00	Adaptador para aspiradores Cattani Ø 6/11/16 mm* en PTFE	Adap.06	1/Caja
30.Z1061.00	Adaptador para aspiradores KaVo Ø 6/11/16 mm* en PTFE	Adap.07	1/Caja
30.E0100.00	Adaptador de terminal para aspiradores de Ø 6 mm* en PP	Adap.05	5/Caja
20.Z1010.00	Adaptador flexible resistente a la torsión para aspiradores de Ø 6 mm* en PTFE	Adap.03	5/Caja
30.Z1062.00	Adaptador compatible solo con Omnitip para aspiradores de Ø 6/11/16 mm* en PP	Adap.08	1/Caja

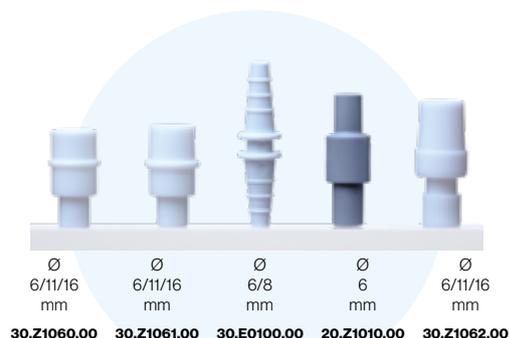

* Pueden esterilizarse en autoclave a 134°C

SISTEMA DE RECOGIDA DE FLUIDOS CORPORALES **OMNI-VAC**

El sistema OMNI-VAC para la recogida de fluidos corporales retiene el material aspirado, evitando así que se obstruya el filtro del sistema de aspiración de la unidad de tratamiento dental. El material aspirado permanece dentro de la bolsa de recogida, que se puede sacar del bote y desecharse según las normativas vigentes.

OMNI-VAC es un sistema para la recogida de fluidos corporales durante la aspiración quirúrgica. Gracias a una fuente de vacío, el sistema de aspiración quirúrgica OMNI-VAC cumple con la normativa vigente y el riesgo de infección para el personal de la clínica dental y el paciente se reduce al mínimo absoluto. La sangre, la saliva, la solución salina, los fragmentos de hueso y los tejidos pueden obstruir en gran medida el sistema de aspiración. En caso de operaciones de implantes bucales o cirugía maxilofacial, el sistema de aspiración de la unidad de tratamiento dental funciona bajo condiciones difíciles. El funcionamiento eficiente es indispensable para proporcionar tratamientos rápidos y seguros.

La bolsa para la recogida de fluidos corporales es desechable, mientras que el bote, fabricado de policarbonato, se puede esterilizar en autoclave a 121°C. El bote tiene una escala graduada para controlar y medir con precisión el volumen de fluidos corporales recogidos. El sistema de recogida de fluidos corporales OMNI-VAC se puede conectar directamente a la unidad de tratamiento dental mediante el tubo de conexión suministrado. La capacidad del bote es de 1,5 litros.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
30.F2001.00	Bolsa desechable para la recogida de fluidos corporales en polietileno	10/Caja
30.F2000.00	Bote para la bolsa de recogida de fluido corporal. El paquete también contiene 1 bolsa desechable y el tubo de conexión para el tratamiento dental en policarbonato.	1/Caja



El sistema de aspiración OMNI-VAC puede colocarse sobre un soporte con ruedas fabricado en acero inoxidable para facilitar el movimiento por el quirófano.

Se pueden colocar hasta 2 botes OMNI-VAC en el soporte al mismo tiempo.

La bandeja del soporte puede usarse como estante para apoyar el fisiodispensador.



Para más información sobre los productos Hu-Friedy o para realizar un pedido, llame al 00800 48 37 43 39 o visite el sitio web [HuFriedy.eu](https://www.HuFriedy.eu)

Para más información sobre los productos Crosstex, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web [crosstex.com](https://www.crosstex.com)

Para más información sobre los productos Omnia o para realizar un pedido, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web [omniaspa.eu](https://www.omniaspa.eu)

Dado que algunos de los productos incluidos en este catálogo pueden no estar disponibles en algunos países, le invitamos a comprobar la disponibilidad del producto con su distribuidor autorizado local o a contactar con nuestro servicio de atención al cliente en el número de teléfono gratuito 00800 48 37 43 39. Disponibles hasta agotar existencias. El resto de nombres relativos a empresas y productos son marcas registradas de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, de sus filiales o empresas asociadas, salvo que se indique lo contrario.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Todos los derechos reservados. 90.L4002.ES/0721